

# FLOWTENS

LEAD THE FLOW

## Transcutane Nervus Tibialis Posterior Stimulatie (T-PTNS)



# Het gebruik van Flowtens


Flowtens kan naar keuze worden gebruikt:

- ofwel met de **patch**
- ofwel met de **enkelbrace**


## Flowtens met patch



Klik de stimulator vast op de buitenkant

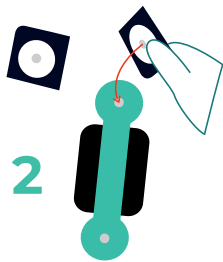

Klik de elektroden vast en verwijder vervolgens de beschermfolie

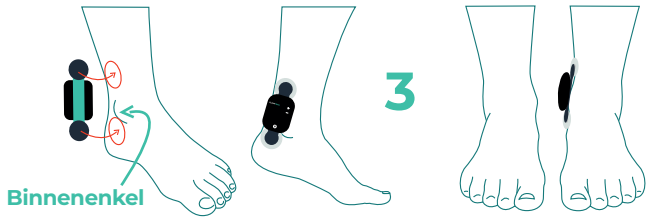


Plaats de patch achter en onder de binnenenkel (de positionering kan naar keuze op uw linker- of rechterbeen gebeuren)

## Flowtens met enkelbrace




Klik de stimulator vast op de buitenkant

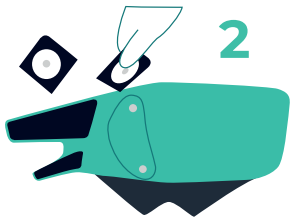


Klik de elektroden aan de binnenkant vast en verwijder vervolgens de folie




Controleer de enkelbrace  
R: Rechtervoet  
L: Linkervoet

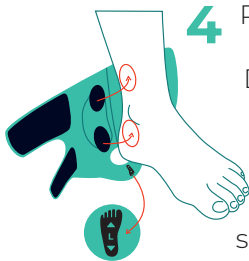

Plaats de voet en sluit de klittenbandsluitingen. De rode zones geven de optimale positionering van de elektroden aan ten opzichte van de binnenenkel bij het sluiten van de enkelbrace

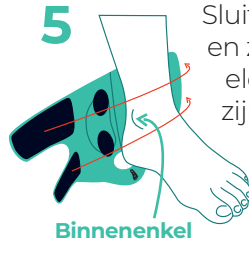

Sluit de klittenbanden en zorg ervoor dat de elektroden correct zijn gepositioneerd ten opzichte van de binnenenkel

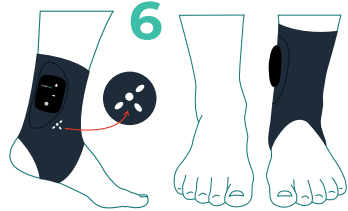

Deze indicator moet zich op uw binnenenkel bevinden

## Smartphone-app



Personaliseerbaar & programmeerbaar




Digitaal & geconnecteerd



Eenvoudig & ergonomisch



# Referenties

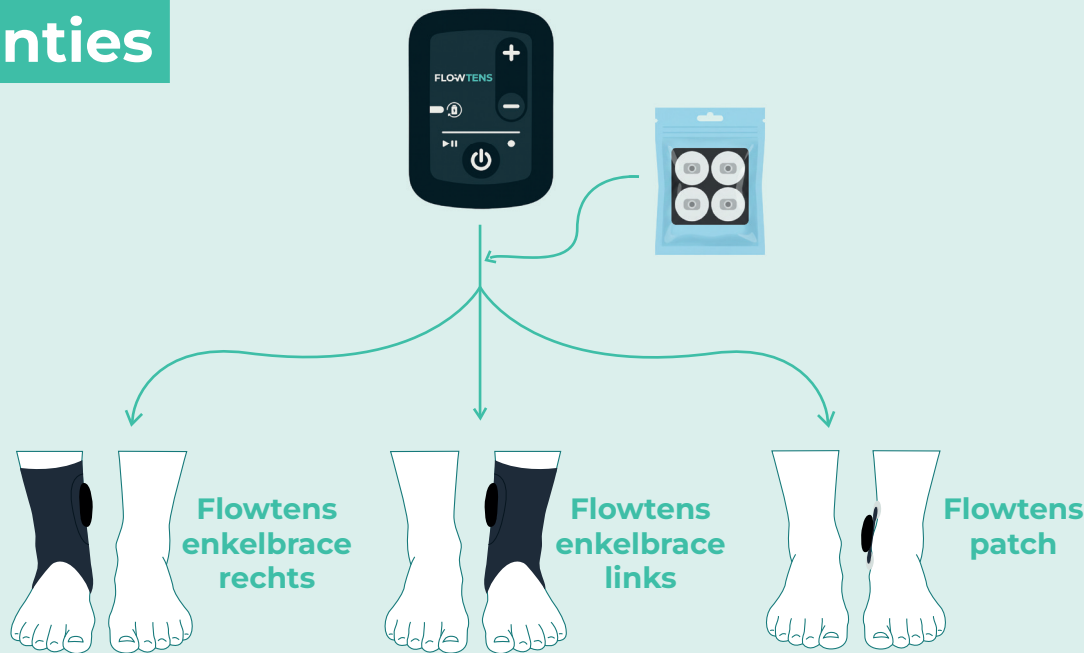

|  | Benaming                                                                   | Ref.               | GTIN                                                                                                                               |
|--|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Stimulator</b><br>(geleverd met een transportdoosje en een oplaadkabel) | FLO-02-201         | 3770025687049                                                                                                                      |
|  | <b>Enkelbrace rechts x1</b>                                                | FLO-02-108-R       | 3770025687025                                                                                                                      |
|  | <b>Enkelbrace links x1</b>                                                 | FLO-02-108-L       | 3770025687032                                                                                                                      |
|  | <b>Patch x1</b>                                                            | FLO-02-109         | 3770025687094                                                                                                                      |
|  | <b>Zelfklevende elektroden</b>                                             | SAE-SC050000 WP-VT |  (01)04719872332183<br>(11)YYMMDD<br>(10)YYWW |
|  | <b>Transportdoosje</b>                                                     | FLO-07-103         | 3770025687100                                                                                                                      |
|  | <b>Oplaadkabel</b>                                                         | FLO-05-101         | 3770025687056                                                                                                                      |

# Beschikbare programma's



## Programma 10Hz

20 10 200  
min Hz µs



## Programma 14Hz

20 14 210  
min Hz µs



## Programma 20Hz

20 20 200  
min Hz µs



## Programma 25Hz

20 25 210  
min Hz µs



## Programma 5Hz

20 5 210  
min Hz µs



## Vrij programma

0 tot 0 tot 0 tot  
120 50 600  
min Hz µs

(Toegangscode: 1234)

### Uitgangsstroom (instelbaar):

0 tot 50 mA\* (+/- 5% van de maximale waarde)

\* Bij een weerstand van 1000 Ohm (+/- 10%)

### Impulsbreedte (instelbaar):

50 tot 600µs (+/-10%)

### Impulsfrequentie (instelbaar):

1 tot 50Hz (+/-10%)

### Programmaduur (instelbaar):

1 tot 120min

### Stroomverbruik in werking:

< 0,1W

### Voeding:

Herlaadbare Lithium-ion Polymeer  
batterij 3,7 V

### RF-karakteristieken:

- Bluetooth® LE: 2400-2483,5 MHz (ISM)
- Modulatie: GFSK
- Zendvermogen: -4,7 dBm
- Kanaalafstand en aantal kanalen: 1 MHz, 40 kanalen
- Type antenne: Keramisch, versterking 0,5 dB

### Afmetingen:

60 mm x 44 mm x 18 mm

### Gewicht:

30 g

### Klantenservice:

- Voor bestellingen:

**order@flowtens.com**

- Voor vragen of klachten:

**contact@flowtens.com**

Tel: +33 (0)9 78 45 27 74

**www.flowtens.com**

Ontworpen, geproduceerd en  
gedistribueerd door FlowStim

Technology, Frankrijk

Pôle Economique - 1010 Av de l'Europe  
33260 La Teste de Buch

FlowStim TECHNOLOGY



Gedistribueerd door:

Glano BV

Rootputte 15

9090 Merelbeke - Melle België Tel

+32 9 2736958 info@glano.be

www.glano.be